


一步制胶 快到飞起

精准配方，无需复杂配制，**15 min快速凝胶**，缩短实验周期，实验效率 up up!

蛋白电泳，WB不用愁！

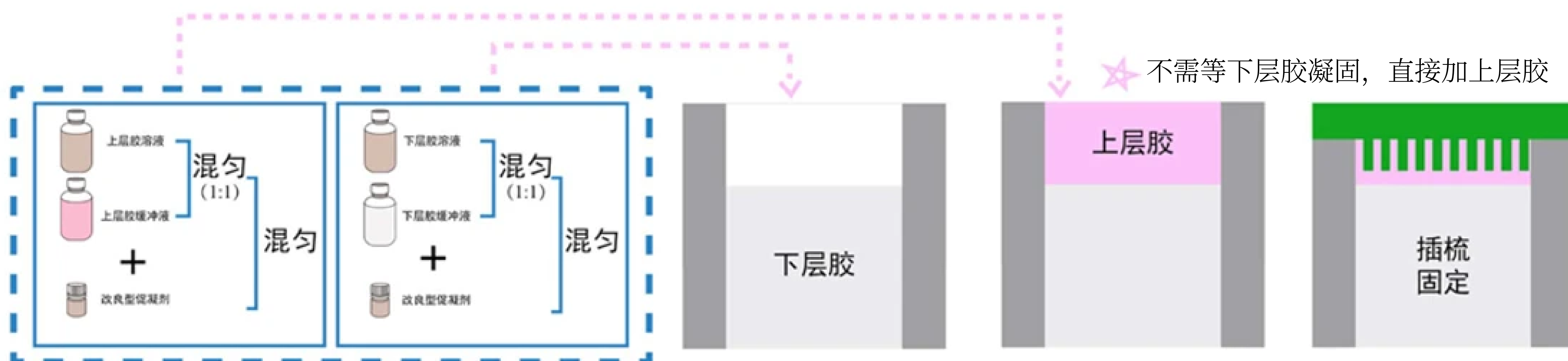

一胶覆盖大中小蛋白，告别浓度选择难题！


版本	货号	产品名称	同类区分
进阶版	P30105	EasyColor™ One-Step Color Rapid Gel Prep Kits (7.5%)	蛋白分子量 30~120 KDa 最佳分离范围 50~100 KDa
进阶版	P30106	EasyColor™ One-Step Color Rapid Gel Prep Kits (10%)	蛋白分子量 20~100 KDa 最佳分离范围 20~80 KDa
进阶版	P30107	EasyColor™ One-Step Color Rapid Gel Prep Kits (12.5%)	蛋白分子量 10~70 KDa 最佳分离范围 15~60 KDa
进阶版	P30108	EasyColor™ One-Step Color Rapid Gel Prep Kits (15%)	蛋白分子量 10~40 KDa 最佳分离范围 10~30 KDa

一步制胶 → “完胜” 两步制胶、传统制胶

15 min快速凝胶、彩色易上样、预混体系、无需液封、无需等下层凝固、改良促凝剂、条带清晰

	传统法	快速两步制胶	一步制胶
制胶时间	至少60 min	30 min	15 min
彩色上样孔	否	是	是
预混液	否	是	是
液封	是	是	否
等待下层凝固	是	是	否
危化促凝剂	是	否	否
结果稳定性	配比不当易导致条带模糊	条带清晰	条带清晰



产品效果图展现 7.5% 胶为绿色；10% 胶为紫色；12.5% 胶为红色；15% 胶为蓝色：

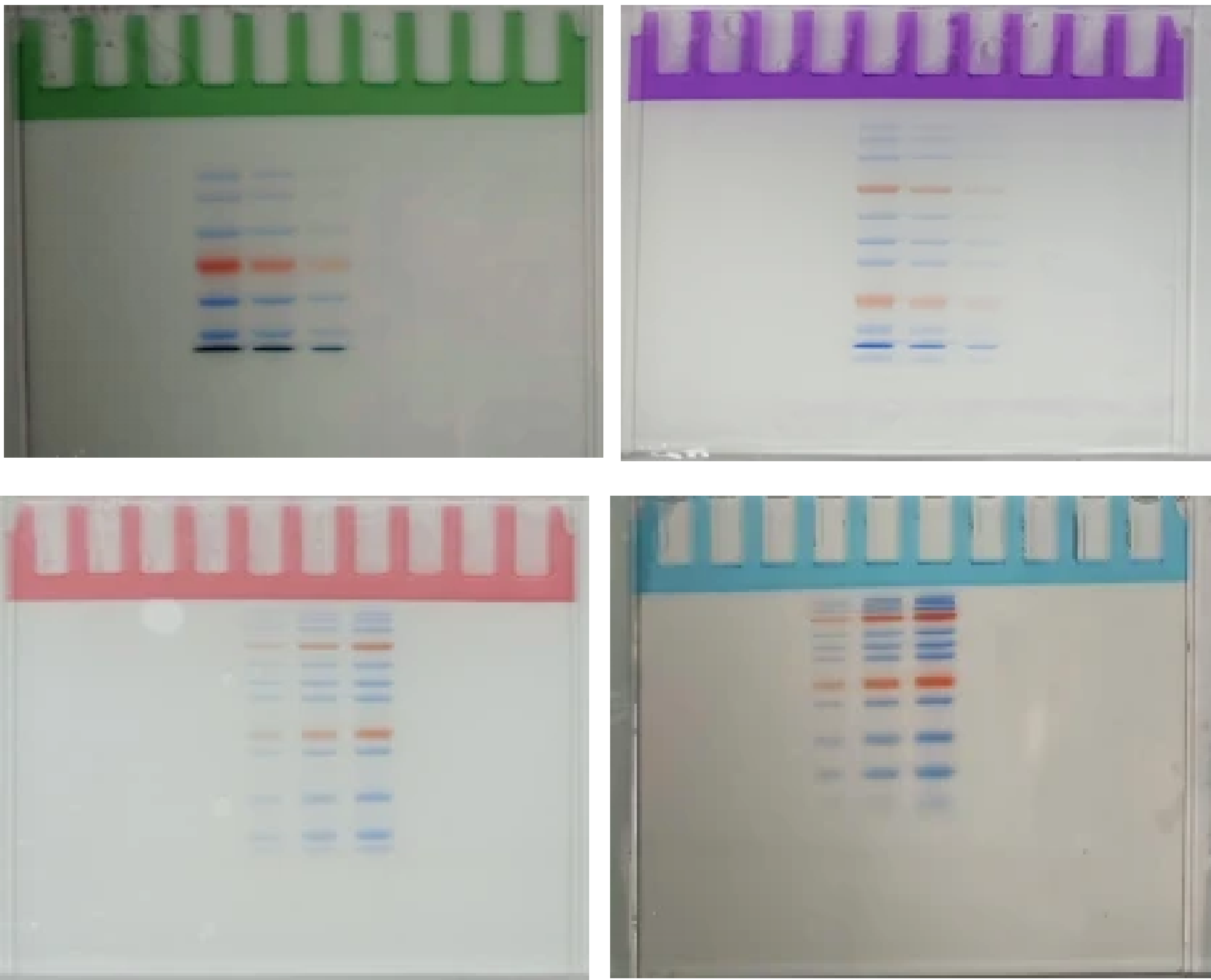

15 min配一块胶，上样孔为彩色，传统胶1 h左右，且上样孔透明，不好点样；
配完下层胶立即加入上层胶，无需等待。

可提供四款产品：7.5%、10%、12.5%、15%

竞品效果图展现：

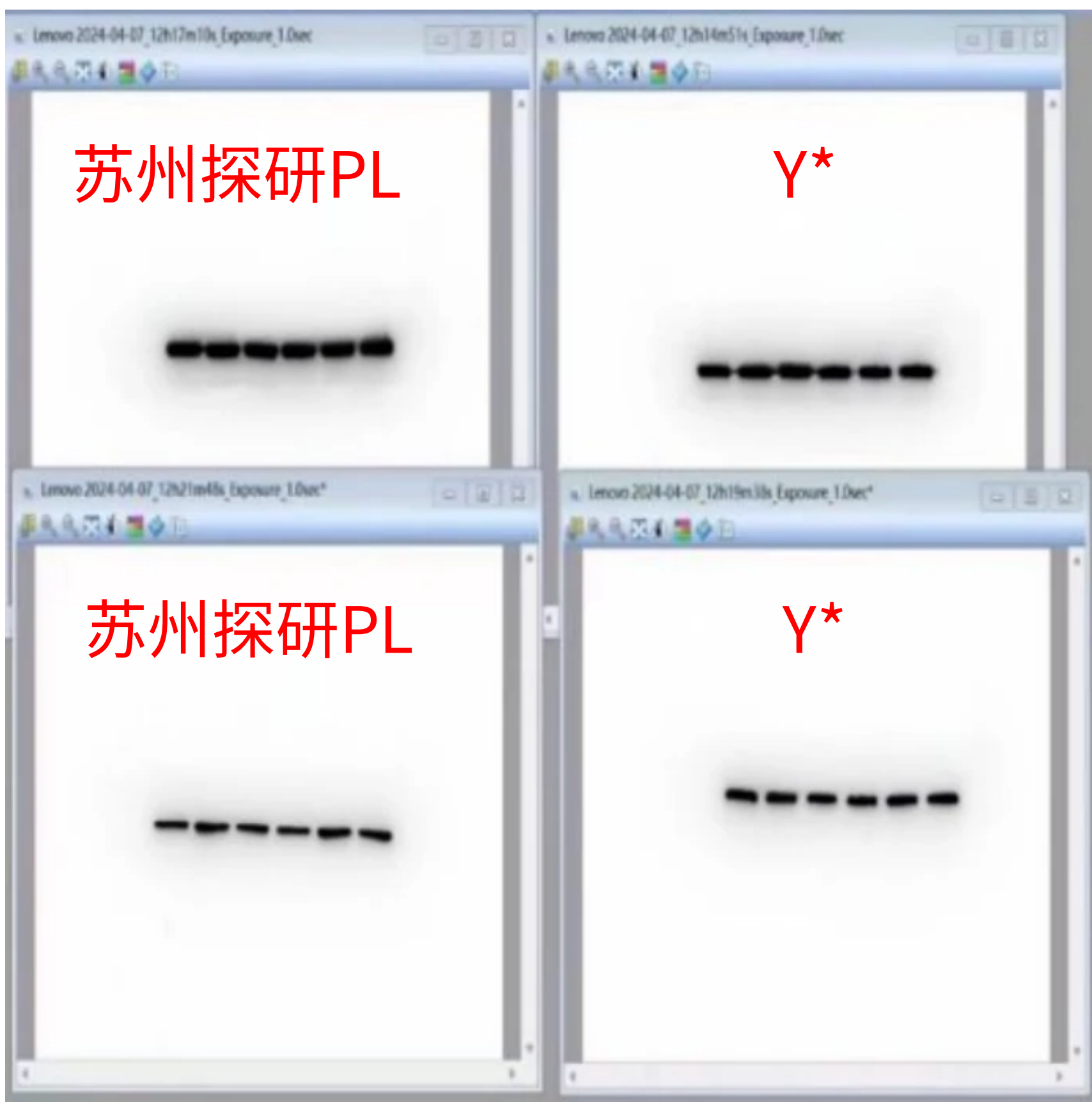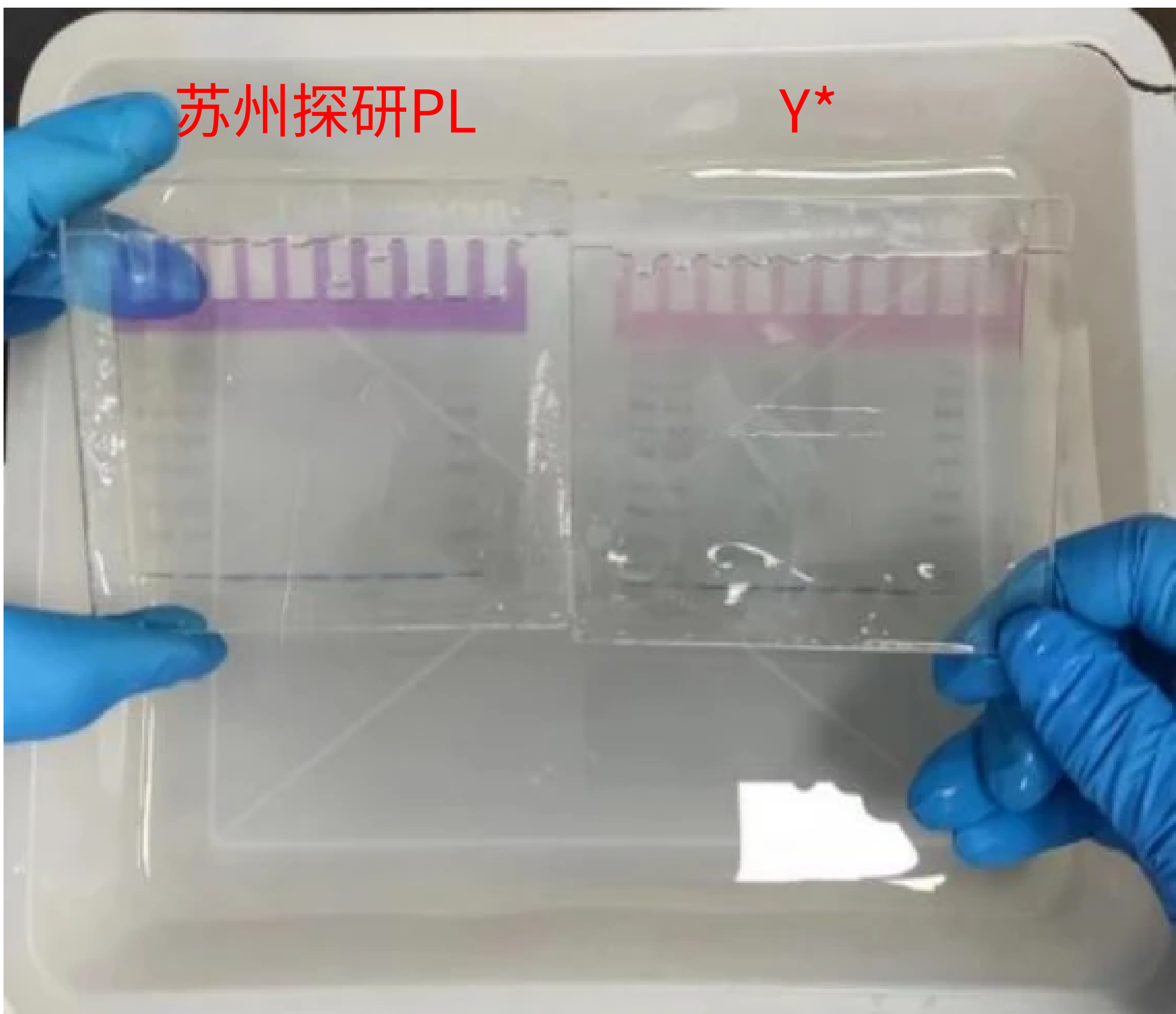

全国渠道
赵女士 18452006115



全国工业/OEM贴牌
刘女士 19852856022



苏州市相城区高铁新城青龙港路286号
长三角国际研发社区启动区2号楼3楼

苏州探研生命科技有限公司
SUZHOU PROBELIVES SCIENCES CO., LTD.